


waterpik[®]
treat yourself better™

VIGTIGT AT AFKALKE
Læs mere på side 7.

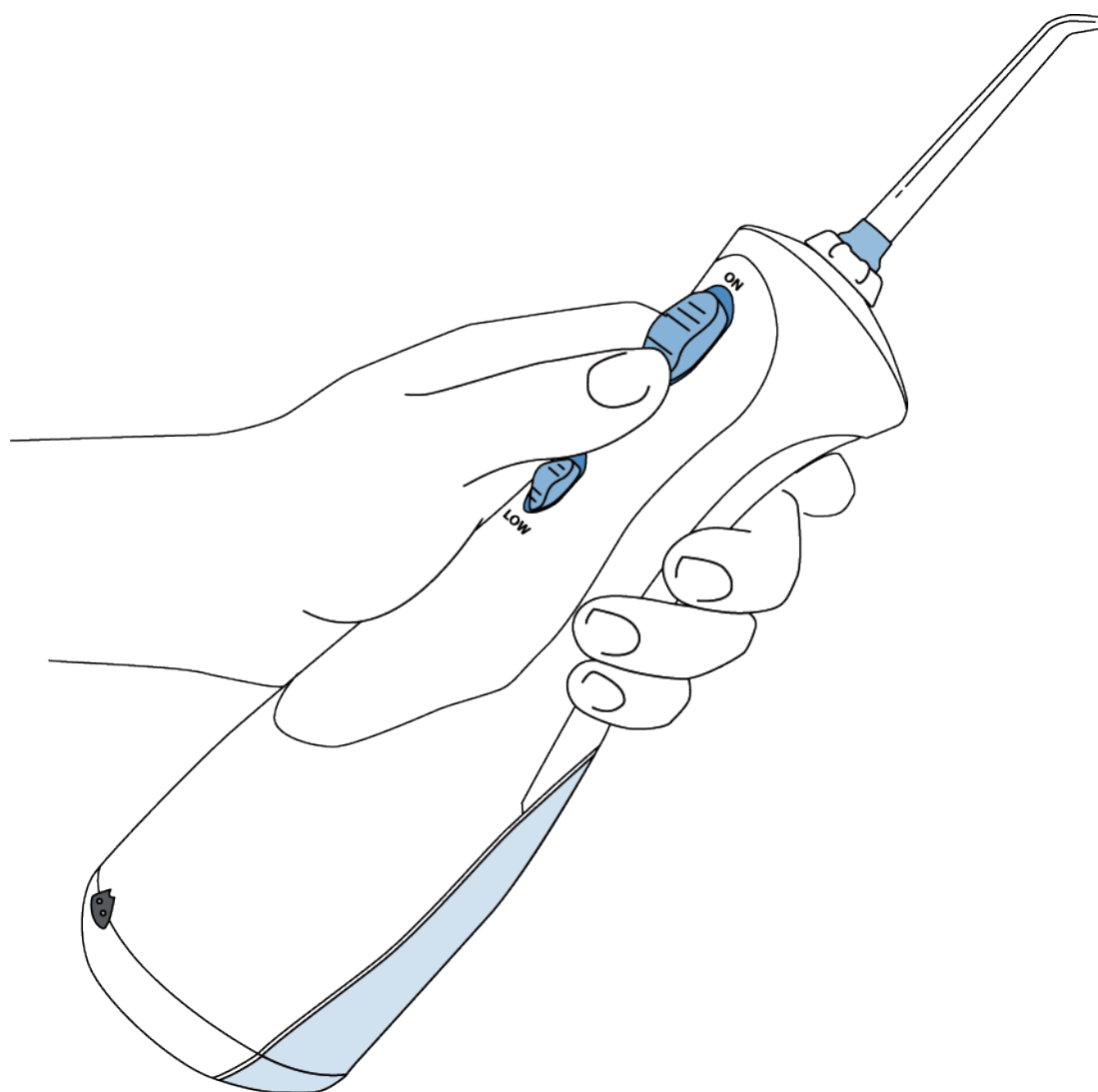

Brugsanvisning
waterpik[®] Ultra
Portabel 450/Opladbar
munddouche


www.EKULF.com

Tillykke! Tak fordi du valgte waterpik Ultra Portabel 450/opladebar munddouche. Med købet af waterpik Ultra Portabel 450/Opladebar munddouche, er du nu godt på vej til en bedre mund- og tandpleje samt et sundere smil! Effekten opleves når waterpik Ultra Portabel 450/Opladebar munddouche med en pulserende vandstråle fjerner bakterier mellem tænderne og dybt ned i tandkødslomerne – hvor tandbørsten har svært ved at komme til.


Traditionel mund- og tandpleje



Hyppig tandbørstning kan kun delvist fjerne madrester og bakteriebelægninger.

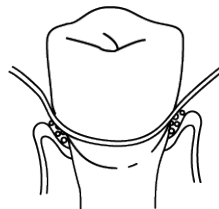

Ved anvendelse af tandtråd, øges rengøringseffekten, men rengøringen bliver ikke optimal.

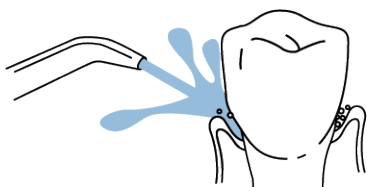

Mund- og tandpleje med waterpik Ultra

Mund- og tandpleje med waterpik Ultra Portabel 450/Opladebar munddoucher fjerner svært tilgængelige madrester og skadelige bakterier.

Vigtige forsigtighedsregler

Ved brug af elektriske produkter, specielt når der er børn tilstede, bør man være opmærksom på nedenstående forsigtighedsregler.

Læs brugsanvisningen grundigt før anvendelse

ADVARSEL

Undgå følgende:

- Berør aldrig laderen med våde hænder.
- Isæt ikke stikket med våde hænder.
- Placér eller opbevar ikke apparatet hvor der er risiko for at det kan falde på gulvet, i badekarret, håndvasken eller lignende.
- Anvend ikke produktet når du er i bad.
- Kom ikke apparatet i vand eller andre væsker.
- Hvis apparatet er faldet ned i nogen form for væske, tag da stikket ud af stikkontakten, inden du berører apparatet.
- Kontrollér stikket og slangen til laderen, for skader. Gør dette inden første anvendelse, men også jævnligt.




ADVARSEL

Mindsk risikoen for alvorlige skader på grund af fejlanvendelse:

- Anvend ikke produktet hvis ledningen eller stikket er skadet, hvis apparatet ikke fungerer som forventet eller hvis det har været i nogen form for væske. Tag i sådanne tilfælde kontakt til autoriseret forhandler, EKULF NeoDenta Dental ApS.
- Giv informationer til børn eller andre brugere, så de anvender apparatet på korrekt vis.
- Anvend ikke vandstrålen direkte under tungen, i ørerne, næsen eller andre skånsomme steder. Dette apparat kan frembringe en kraftig vandstråle som kan skade de nævnte områder alvorligt.

- Anvend ikke apparatet i mere end 5 minutter pr. gang. Vent i 2 timer, inden produktet anvendes igen.
- Anvend kun tilbehør, inkl. Jet Tips, Pik Pocket Tips, Tungeskraber Tip og Orthodontic Tips, som er anbefalet af EKULF NeoDenta Dental ApS.
- Skil ikke den bløde del af Pik Pocket tippet fra den klare del. Hvis den af en eller anden grund skulle løsnes, kassér da begge dele og anvend en ny Pik Pocket tip.
- Fyld kun beholderen med vand eller andre anbefalede væsker (ved anvendelse af mundskyl, bland med forholdet 1:1)
- Undgå at isætte ukendte objekter af nogen form, i nogen af produktets indgange.
- Hold stik og ledning væk fra varme og kogende flader.
- Anvend ikke produktet samtidig med brug af oxygen/syre- og/eller aerosol/spray (hårspray og lignende).
- Produktet må ikke anvendes udendørs.
- Anvend ikke produktet hvis du har nogen form for tandsmykker og lignende. Fjern disse inden du anvender produktet.
- Anvend ikke produktet vis der er åbne sår på tungen.
- Hvis din læge eller hjertespecialist har ordineret eller givet dig besked om at tage antibiotika før en tandbehandling, skal du rådføre dig med din tandlæge inden brug af dette produkt.
- Anvend ikke mundskyl/dentalopløsninger som indeholder blegemiddel eller jod.


Gem disse instruktioner.

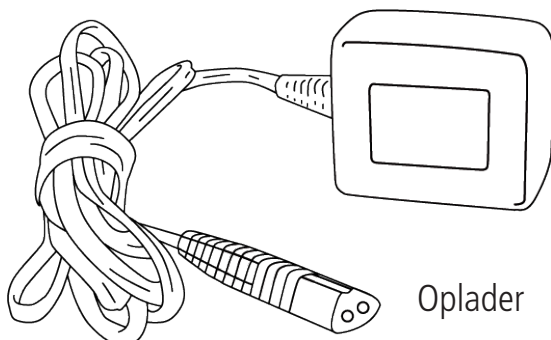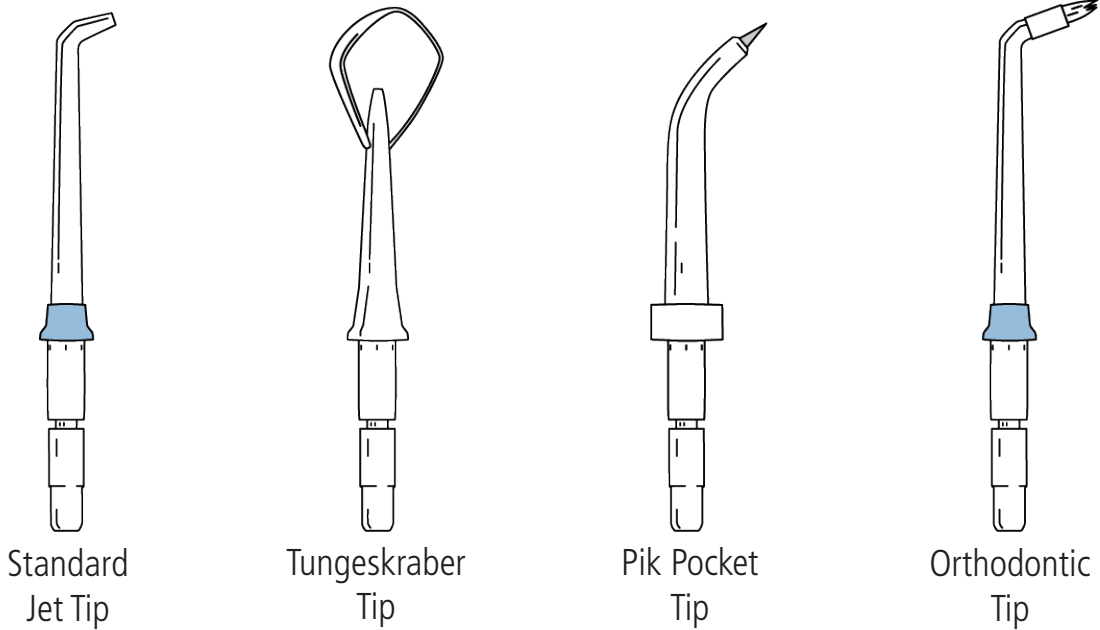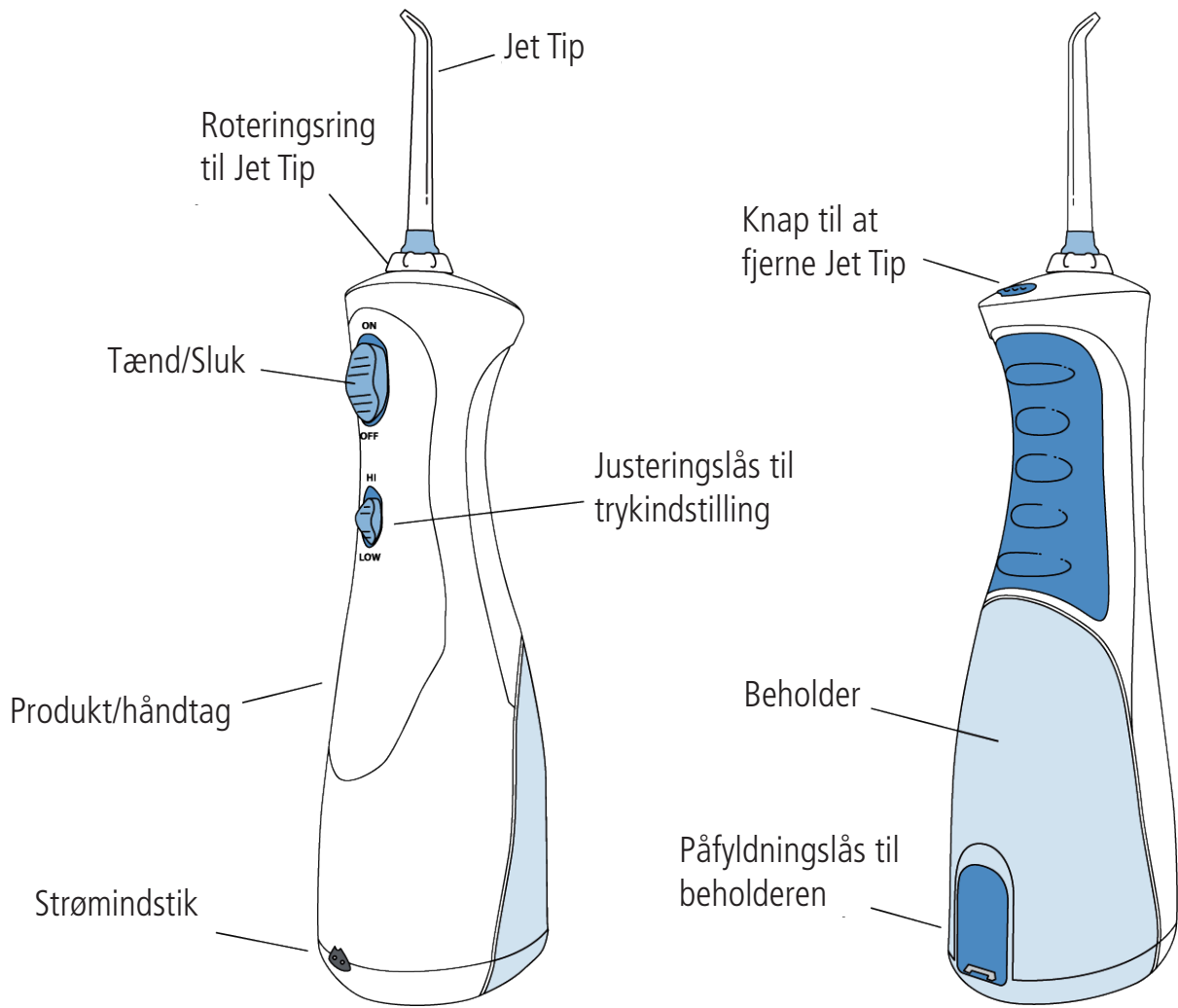

Ekstra Tips kan købes direkte hos
 EKULF NeoDenta Dental ApS,
 tlf.nr. 45 82 08 22 eller via
www.ekulf.com


Vigtigt! Kontrollér at apparatet er slukket og oplad derefter i 16 timer.

Sæt stikket i en 230 volts stikkontakt. waterpik Ultra Portabel 450/ opladbar munddouche holder strøm i ca. 1 uge, afhængig af anvendelsen.

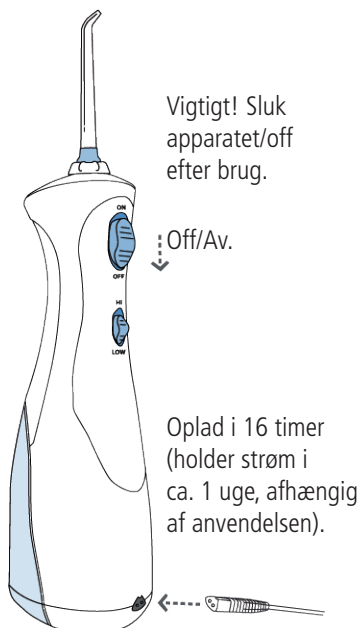



Påfyldning af beholderen

Åben låget og fyld beholderen med lunkent vand.

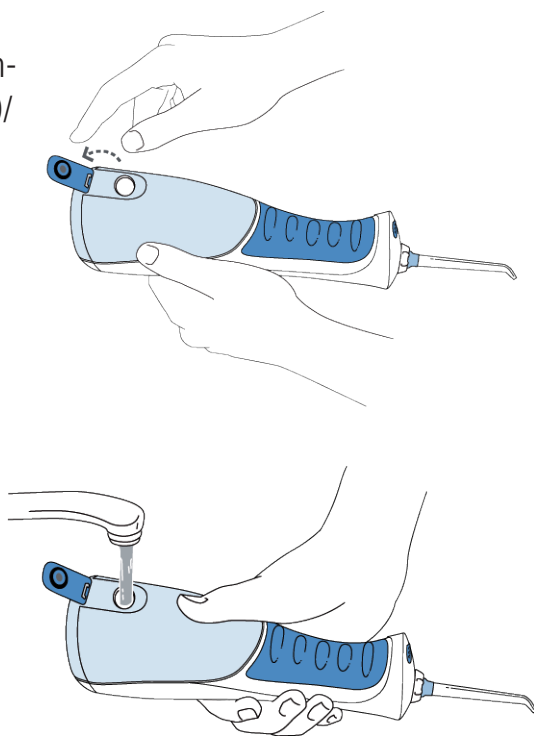

Montering af tip


Indsæt tippen i hullet på toppen af apparatet. Tippen klikker fast når den sidder korrekt.

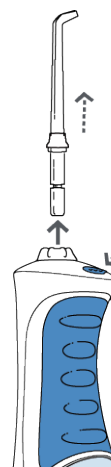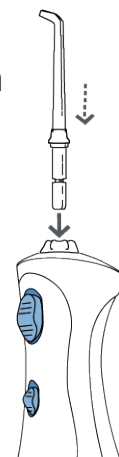


For at afmonterer tippen, tryk da på udløser-knappen (den lille knap) på siden af apparatet. Herefter kan tippen fjernes.

Regulering af tryk


Du kan regulere trykket på vandstrålen ved at justere på knappen for tryk, på håndtaget. Tryk ned (I) for blød rengøring mellem tænderne eller hvis du har følsomt tandkød. Tryk op (II) for en hård vandstråle og dermed kraftigere rengøring mellem tænderne og i tandkødsranden.

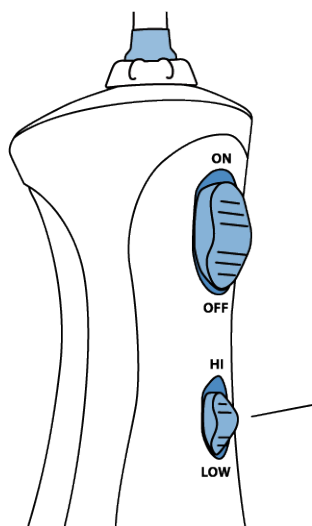

Målret strålen ved at dreje på roteringsringen øverst på håndtaget.




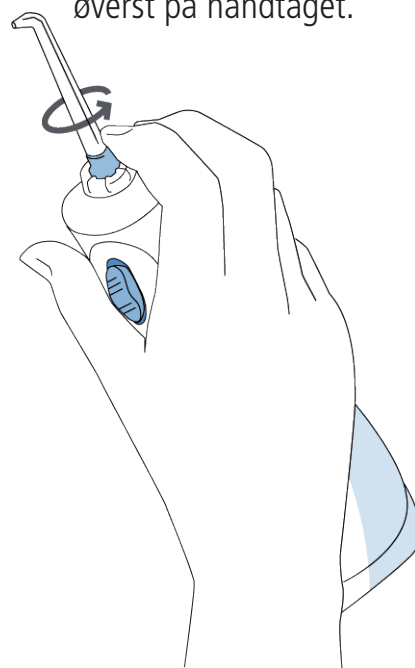


Hold apparatet med tippen øverst ved anvendelsen, for det bedste resultat.

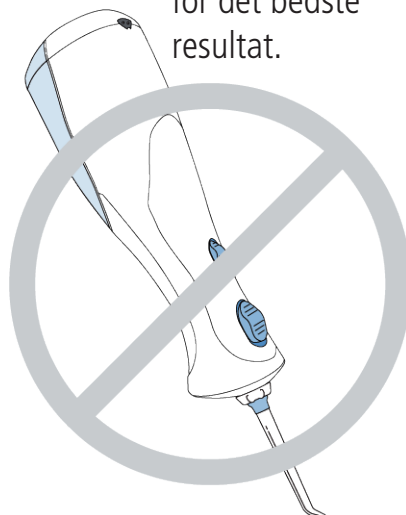


Anbefalet teknik

Læn dig ind over håndvasken og placér tippen i munden. Ret spidsen af tippen ned mod et tandmelletrum. Slut munden omkring tippen så vandet kan løbe ud og ned i vasken. For at opnå det bedste resultat, start da med de bagerste kindtænder og arbejd systematisk frem til de forreste tænder. Bevæg tippen med glidende bevægelser langs tandkødsanten og gør korte ophold ved mellemrummene mellem tænderne. Fortsæt til alle områder, rundt om og mellem tænderne, er blevet rengjort.

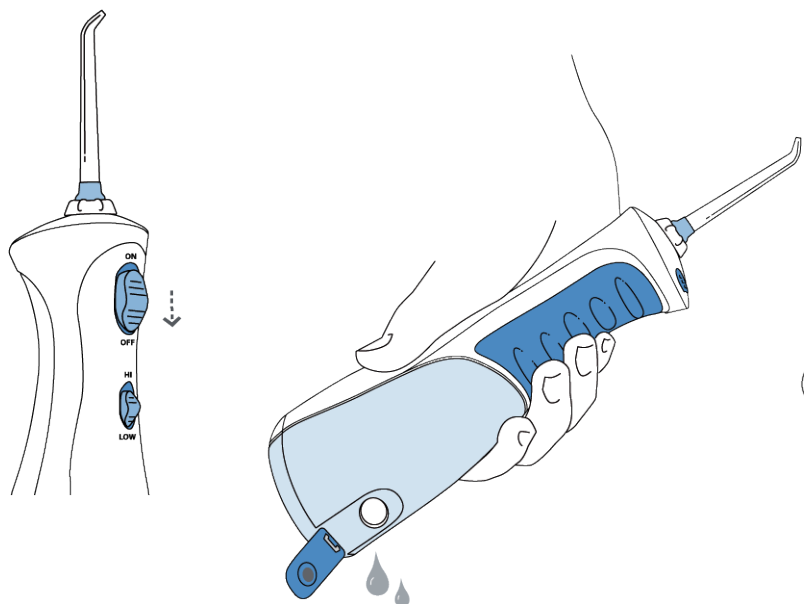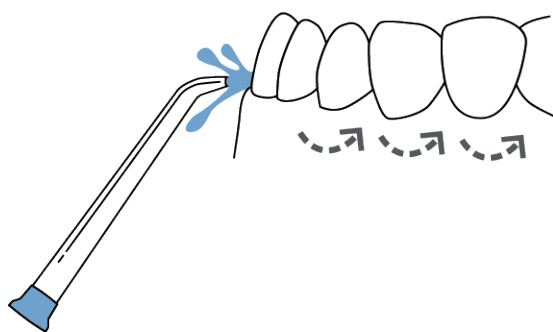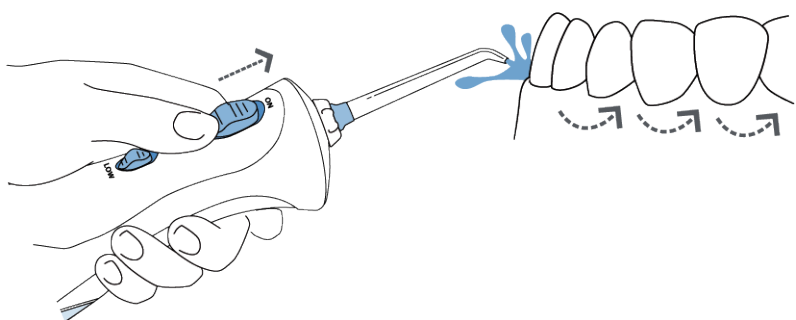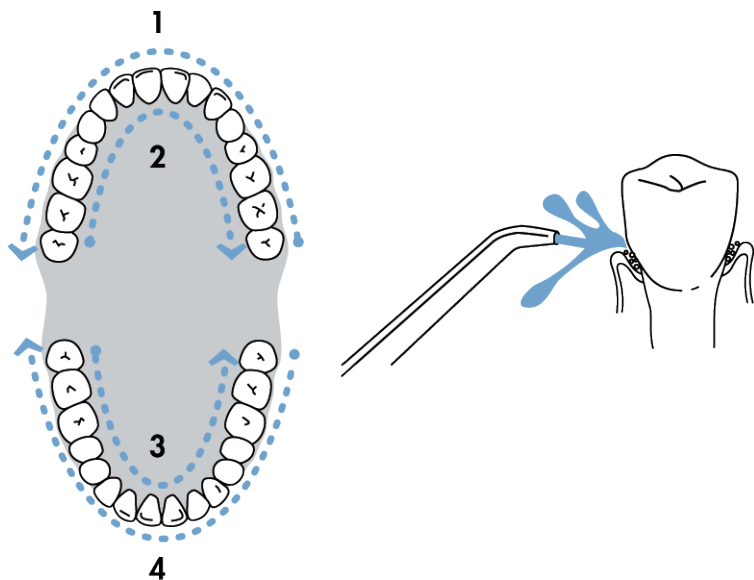


Beholderen kan ved behov afmonteres, ved at løsne beholderen i bunden og trække beholderen nedad fra håndtaget.

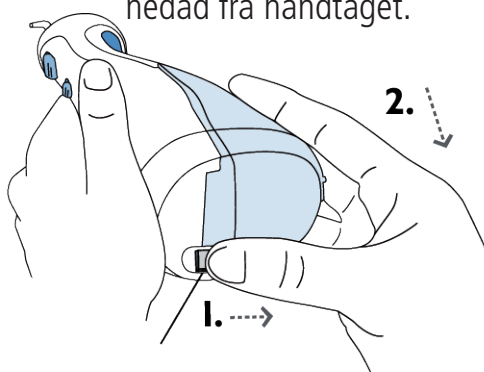

Anbefalet teknik

Sluk for apparatet og tøm beholderen.

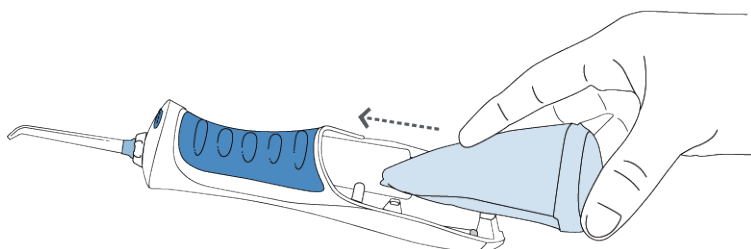


For at sætte beholderen på igen, isættes beholderen nedefra og op mod toppen. Tryk da sammen så der lyder et "klik".

TIPS


Standard Jet Tip

Standard Jet Tip til rengøring mellem tænderne og under tandkødsranden.

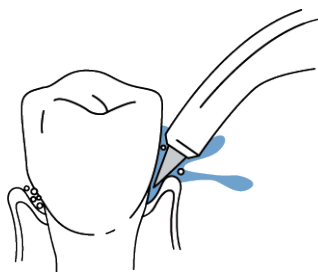


Pik Pocket Tip

Pik Pocket tippen som har en blød, spids gummitip, gør at vandet eller anden anbefalet bakteriedræbende væske trænger dybt ned i tandkødsranden. Læn dig ind over håndvasken og placér den bløde tip i en 45 graders vinkel mod tandkøds-kanten. Derefter fører du den bløde spids ind i tandmellemlrummet. Tænd apparatet ved laveste trykstyrke og før derefter tippen rundt i alle kanter og mellemrum. Fortsæt arbejdet systematisk til beholderen er tom.

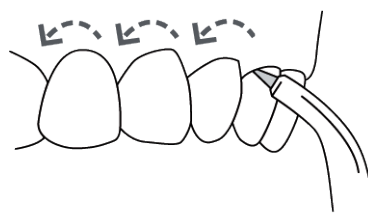


Tungeskraber Tip

Læn dig ind over håndvasken og placér tunge-skrabereren på midten af tungen og halvt bagude. Start apparatet på laveste trykstyrke og træk tungeskrabereren fremad. Pres ikke for hårdt på tungen. Trykket kan øges efter behov.

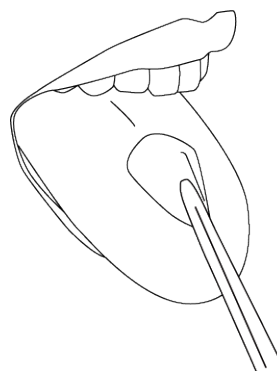

Orthodontic Tip

Denne unikke tip er designet til på samme tid at børste og skylle svære områder, f.eks. ved bøjle på tænderne. Læn dig ind over håndvasken og placér tippen i en 90 graders vinkel mod tænderne ved tandkøds-kanten. Tænd apparatet og begynd at børste rundt. Vandet vil løbe gennem børsten og skylle de bakteriebelægninger og madrester væk, som løsnes ved børstningen.

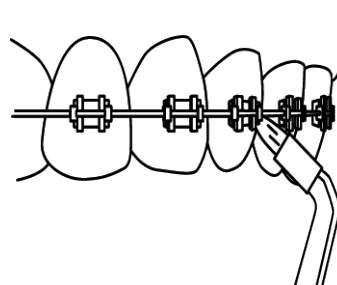

For det bedste resultat anbefales det at Orthodontic Tip udskiftes efter 6 måneders brug. Ekstra Tips kan købes direkte hos EKULF NeoDenta Dental ApS, tlf.nr. 45 82 08 22 eller via www.ekulf.com

SERVICE/ VEDLIGEHOLDELSE

Anvendelse af mundskyl og andre dentalløsninger

waterpik Ultra Portabel 450/Opladebar munddouche kan anvendes med mundskyl og andre desinficerende dentalopløsninger. Spørg din tandlæge om hvilken type der er bedst for dig og om det findes nødvendigt.

OBS: Visse dentalopløsning kan forkorte levetiden for apparatet. Hvis du har spørgsmål vedrørende anvendelse af en specifik dentalopløsning, kontakt da EKULF NeoDenta Dental ApS, tlf.nr. 45 82 08 22.

HUSK at skylle apparatet med rent, lunkent vand efter anvendelse af eventuelle dentalopløsninger. Hold tippet ned mod håndvasken og lad apparatet køre til beholderen er helt tom. Dette forhindrer at tippet tilstoppes, hvilket forlænger apparatets levetid.

Apparatet kan også aftørres med en blød klud, hvis det findes nødvendigt. Beholderen kan rengøres med opvaskemiddel og vand, eller øverst i opvaskemaskinen. Fjern den elektriske del inden rengøring af beholderen. Hvis apparatet udsættes for kolde temperaturer, fjern da beholderen og tænd apparatet og lad den køre til den er helt tom. Det forhindrer at vandet i apparatet fryser.

Service/Vedligeholdelse

VIGTIGT AT AFKALKE

Apparatet afkalkes jævnligt, ligesom afkalkning af kaffemaskine o.l. er en nødvendighed, for vedligeholdelse og længere levetid.

1. Bland 2 spsk. Eddike med 5 dl. Vand
2. Fyld blandingen i beholderen og kør ca. halvdelen af blandingen igennem. Lad resten stå i ca. 10 minutter. Sørg for at Jet tippet sidder på apparatet imens, for at undgå vandspild.
3. Køresten af blandingen igennem. Fyld derefter beholderen med varmt vand og køresten igennem til beholderen er helt tom, for at rense for rester.

waterpik Ultra Portabel 450 indeholder ingen elektriske dele som kræver løbende service/vedligeholdelse. Reparation af apparatet bør foretages af en autoriseret fagmand eller af EKULF NeoDenta Dental ApS, tlf.nr. 45 82 08 22. Hertil kan også rettes henvendelse for produkt- og serviceinformation. Ved henvendelse oplyses modelnr.

HJÆLP TIL FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
Tips Utæt mellem tip og roteringsring.	1) Tippen er ikke trykket helt ned.	1) Tag tippen af og sæt den på igen, så en "klik" lyd høres.
waterpik Ultra Portabel 450 Beholderen er utæt.	1) Der er stadig væske i beholderen. 2) Beholderen er ikke samlet ordentligt med håndtaget. 3) Låget til påfyldning af vand er ikke lukket.	1) Tøm altid beholderen efter brug. 2) Tag beholderen af og sæt den på igen, som i instruktionen. 3) Luk låget til påfyldning ordentligt.
Utilstrækkeligt tryk på vandstrålen.	1) Apparatet vender på hovedet. 2) Utilstrækkelig mængde væske i beholderen. 3) Beholderen er kalket til. 4) Justeringsknap er sat på lavt tryk (I).	1) Tippen skal være højere oppe i forhold til beholderen. 2) Fyld beholderen med væske. 3) Fyld beholderen med lunkent vand og lidt eddike. Kør apparatet tomt. Fyld siden beholderen op med vand og kør apparatet tomt. 4) Justér knap til højt tryk (II).
Apparatet starter ikke.	1) Batteriet er ikke opladet.	1) Kontrollér at stikkontakt virker ved at teste med et andet apparat. Sæt tænd/sluk knap på sluk. Tilslut opladeren og oplad i 16 timer. 2) Se at alle opladerens kontakter er rene og hele.

For yderligere spørgsmål kontaktes EKULF NeoDenta Dental ApS, tlf.nr. 45 82 08 22 eller via www.ekulf.com

BEGRÆNSET 2-ÅRS REKLAMATIONSRET

GÆLDER IKKE VED HÅNDBERINGSFEJL!

Vi garanterer den første køber/ejer af dette nye produkt, at der ikke er materielle fejl herpå og det fungerer i 2 år fra købsdatoen. Gem din kvittering som bevis på købsdato. Vi reparerer eller udskifter dele på produktet hvis vi konstaterer nogle defekter. Dette gælder ikke hvis der er lavet ændringer på produktet eller det er misvedligeholdet og/eller ikke har været anvendt i overensstemmelse med brugsvejledningen. Dvs. at hvis apparatet har været i direkte kontakt med vand, har været tabt på gulvet eller gået i stykker som følge af kalk i apparatet, dækker reklamationsperioden ikke! Denne begrænsede reklamtionsret gælder ikke for de forskellige tilbehør som Jet Tips mm. Reklamationsperioden omfatter ikke håndteringsfejl.

Distributør:

Sverige



EKULF AB

Navestadsgatan 31

Box 111 01

600 11 NORRKÖPING

Tlf.: 0046 11 14 40 30

Fax: 0046 11 14 50 52

www.ekulf.com

Mail: info@ekulf.se

Danmark



EKULF NeoDenta Dental ApS

Tlf.: 45 82 08 22

Fax: 45 82 28 66

www.ekulf.com

Mail: dental@neodenta.dk

waterpik®
treat yourself better™