


waterpik[®]
treat yourself better™

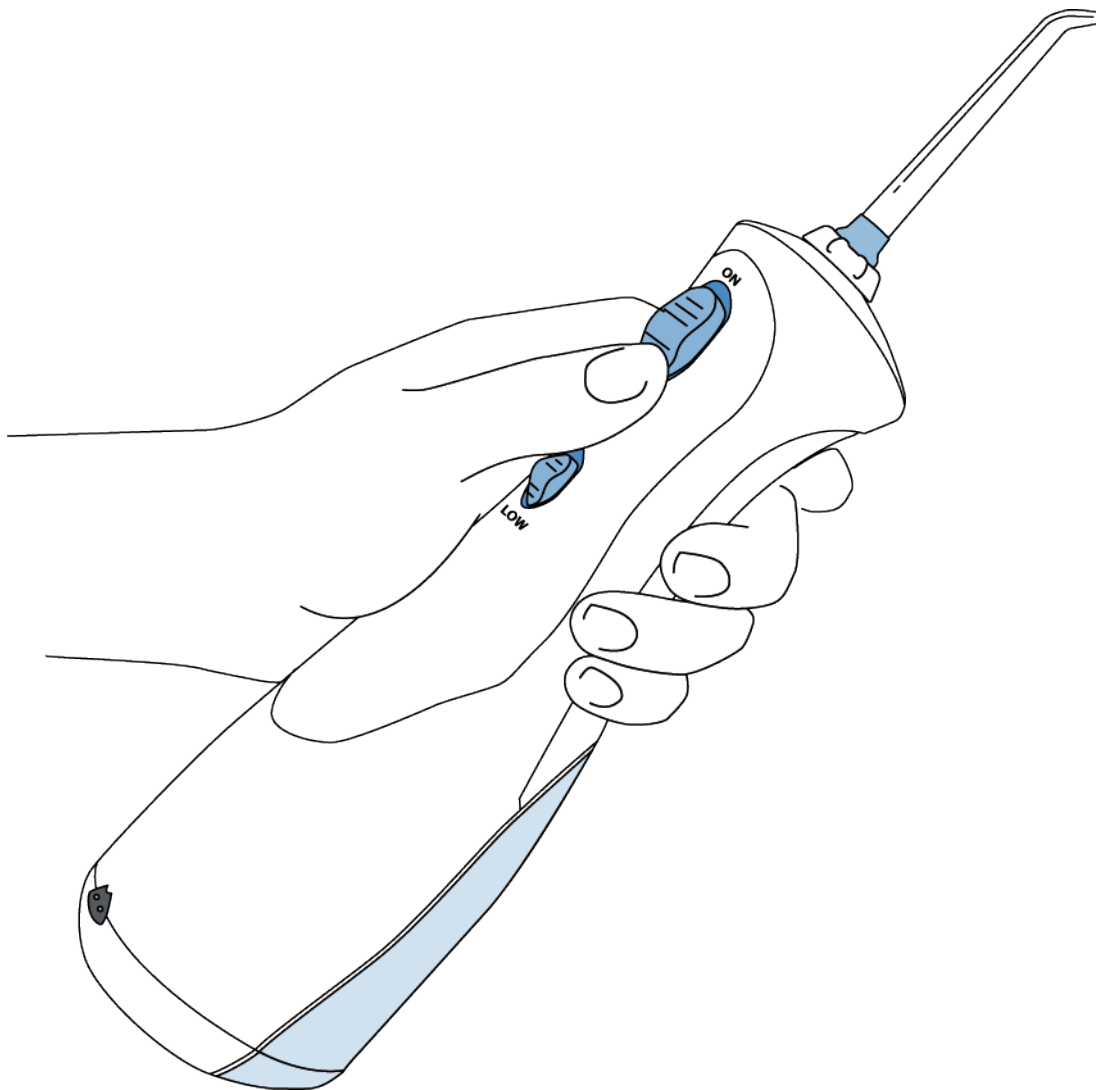

Bruksanvisning
Waterpik[®] Ultra 450
Oppladningsbar munndusj


www.EKULF.com

Gratulerer med ditt valg av å anskaffe en Waterpik Ultra Dental Water Jet. Du er nå på god vei til en bedre munn og tannhelse, samt et sunnere smil!


Enligt dokumentasjon/studier fjerner Waterpik Ultra Dental Water Jet gjennom at en pulserende vannstråle skadliggjør bakteriene mellom tennene og dypt nede i tannkjøttet, der en vanlig tannbørste har vanskelig for å komme til.

Takk for at du valgte Waterpik Ultra Dental Water Jet!


Tradisjonell/vanlig tannbørsting

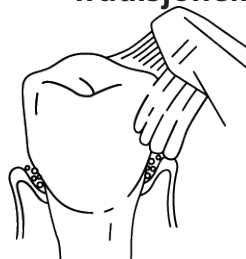

Vanlig tannbørsting kan bare delvis ta bort matrester og bakteriebelegg.

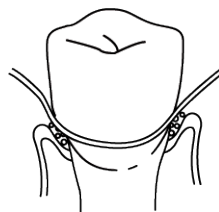

Ved bruk av tanntråd øker rengjøringen, men selv da ikke helt optimalt.

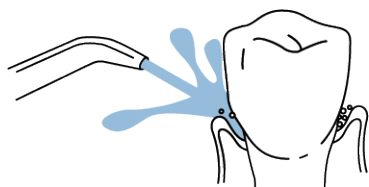

Munn- og tannhygiene med Waterpik Ultra

Munn – og tannhygiene med Waterpik Ultra Dental Water Jet fjerner vanskelige matrester og skadelige bakterier.

Viktige forsiktighetsregler

Ved bruk av elektroniske produkter, spesielt med barn i nærheten, bør man være oppmerksom på følgende forsiktighetsregler/tiltak.

Les bruksanvisningen nøye før bruk

VARNING

Unvik å få støt:

- Ta ut stikk-kontakten etter bruk.
- Ta aldri i stikk-kontakten med våte hender.
- Plasser eller legg den aldri på steder der det finnes risk for at det kan falle ned i et badekar, vaskebrett eller liknende.
- Bruk ikke produktet i samband med bad.
- Leg ikke produktet ned i vann eller annet væske.
- Om produktet skulle falle ned i vann eller annet væske så ta først ut stikk-kontakten før du tar i den.
- Kontroller stikk-kontakten og ledningen for skader, gjør dette før du bruker den i gjen ved føstegang, men gjør også dette forsettningsvis.




VARNING

For å minimere risken for å brenne seg, få elektrisk støt, brann eller alvorlige skader grunnet feilbruk:

- Bruk ikke produktet om ledningen eller stikk-kontakten er ødelagt, om den ikke fungerer ordentlig, eller den har falt i noen form av væske, ta i så fall kontakt med en autorisert selger eller Water Pik Inc.
- Gi nøyaktige instruksjoner til barn og andre som trenger det for å kunne bruke produktet på rett måte.
- Ret ikke vannstrålen direkte under tungen, i ørene, nesen eller andre ømfintlige områder. Denne produkten kan gi en kraftig vannstråle som kan skade disse områder alvorligt. Les bruksanvisningen eller følg de instruksjoner som anbefales av Din tannlege eller tannhygienist.

- Bruk ikke denne produkt mer enn 5 min. Vent i 2 timer før du kan bruke den igjen.
- Bruk bare tilbehør, inklusiv jet tips, Pik Pocket tips, tungerengjørere og orthodontic tips.
- Forsvinner ikke den myke delen av Pik Pocket tip fra den klare delen. Om den av noen anledning skulle løsne, kast da både den og skaftet og bytt ut den mot en ny Pik Pocket tip.
- Fyll bare beholderen med vann eller andre rekommenderte væsker.
- Unvik å spærre og sette inn ukjente objekter av noe form i noen av oppløsningene på produktet.
- Hold stikk-kontakten og ledningen borte fra varme steder.
- Bruk ikke produktene samtidig som noen bruker oxygen/syre- og/eller aerosol-sprayer. (hårsprayer og lignende).
- Produktet skal ikke brukes utomhus.
- Bruk ikke produktet om Du har noen form av tannsmykke og lignende. Ta bort disse før du bruker produktet.
- Bruk ikke produktet ved åpne sår på tungen.
- Om din lege eller hjertespesialist har rådet deg om å bruke antibiotika for tannbehandling, skal Du råde deg med Din tannlege før du bruker denne produkt
- Anvend ikke munnskyld/dentaloppløsninger som inneholder blekningsmiddel eller jod.


Spar/behold disse instruksjonene.

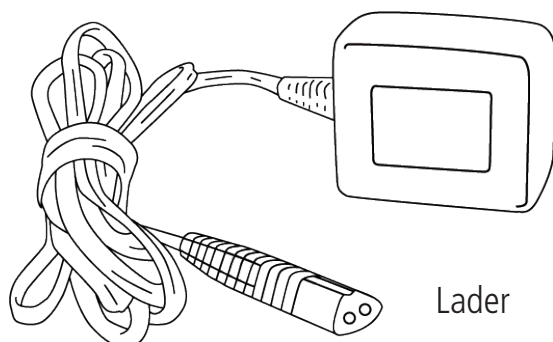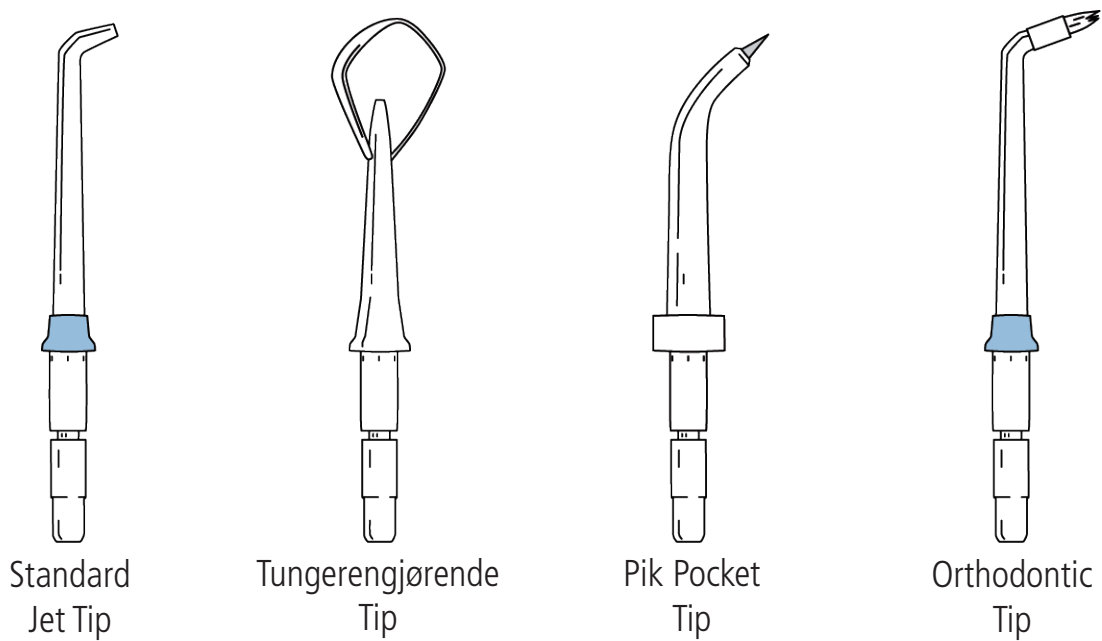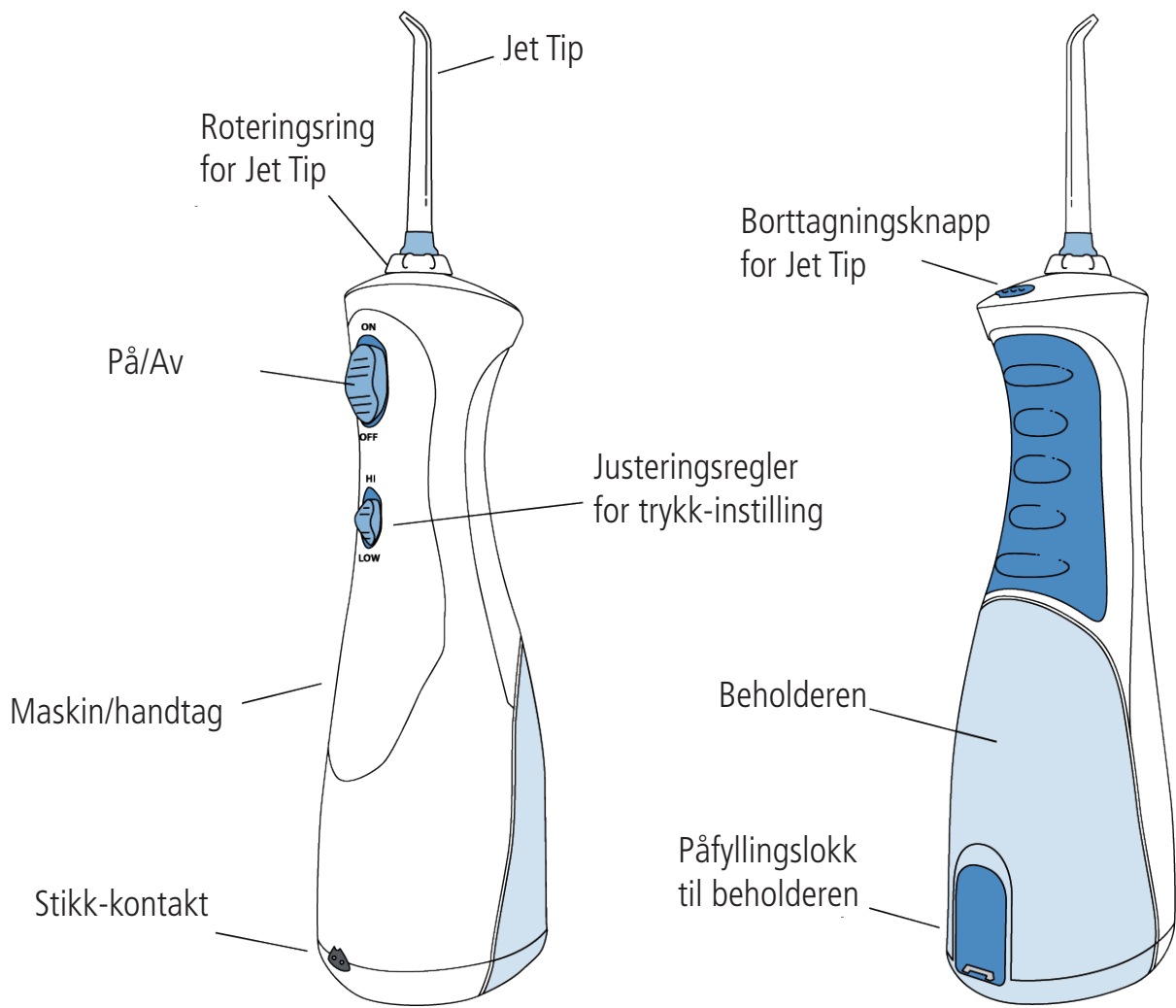

ReserveTips kan kjøpes direkte av
PRODENT EKULF AB, tlf. 69 15 30 00
eller via www.ekulf.com


Viktig! Kontroller at apparatet er avslått og ladet i 16 timer første gangen.

Sett inn stikk-kontakten i et 230 volts uttak Waterpik Ultra Portabel/ Oppladningsbar Munndusj holder ladingen i ca 1 uke ved bruk.

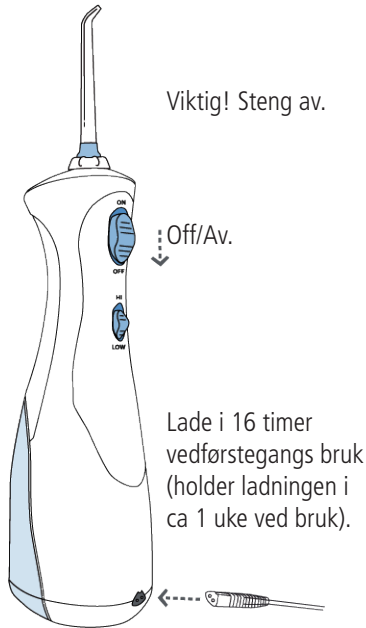



Påfylling av beholderen

Åpne lokket og fyll beholderen med lunket vann.

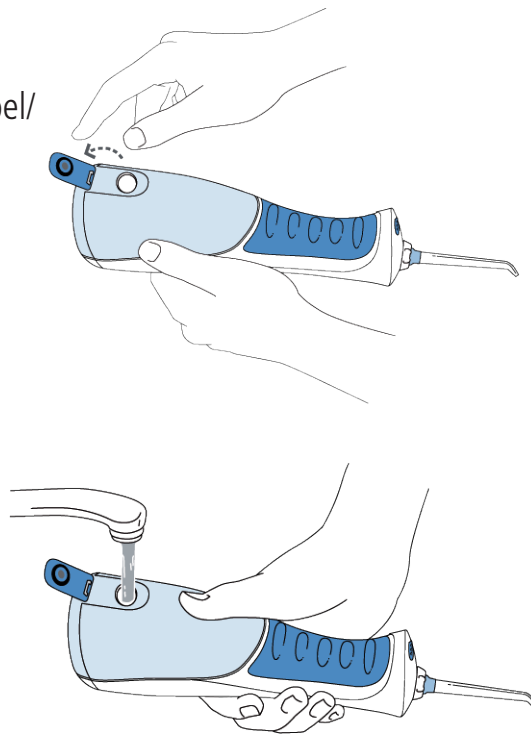


Instalering og fjerning av Tips

Sett i Tipen i midten av handtaget. Et klikk-lyd høres når den sitter fast ordentlig.

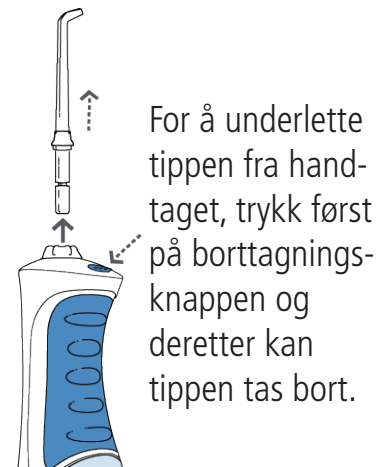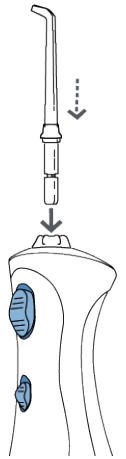

Justering av trykkinstilling


Du kan regulere trykket på vannstrålen gjennom at på hantaget skulle kunne flytte justeringrattet for trykkinstillingene. Dra den nedover (I) for mykere rengjøring eller om du har følsomt tannkjøtt. Skyv den oppover (II) for å et harder/kraftigere trykk på vannstrålen og resultatet blir en kraftigere rengjøring mellom tennene og i tannkjøttskanten.

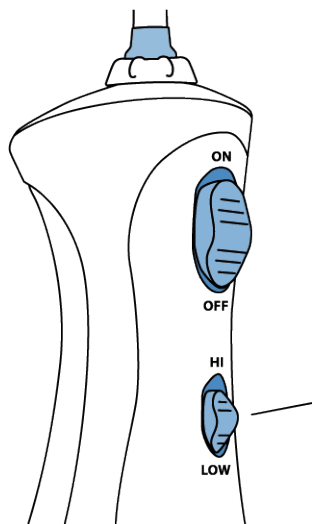

Hold produktet stående under anvending for best resultat.






Reguler strålen gjennom å snurre på roteringsratett øverst på handtaget.

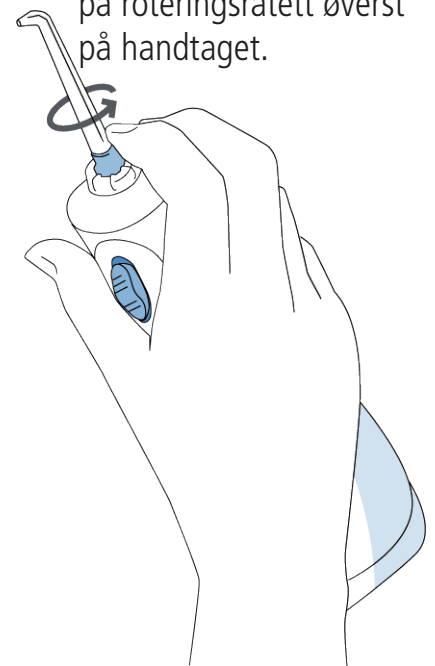

Anbefalt teknikk



Bøy deg ned mot handfatet og plasser jet tippens i munnen. Hold tipp-spissen i 90 graders vinkel mot tannkjøttskanten. Ha munnen stengt, men med en liten åpning så at vannet kan rinne ut og ned i handfatet. For å oppnå best mulige resultat, start med de bakerste tennene og gå systematisk mot frontennene. Før tippens med en glatt rørelse langs tannkjøttskanten og gjør korte opphold i mellomrommen mellom tennene. Fortsett så til alle områdene rundt og mellom tennene har blitt rengjort.

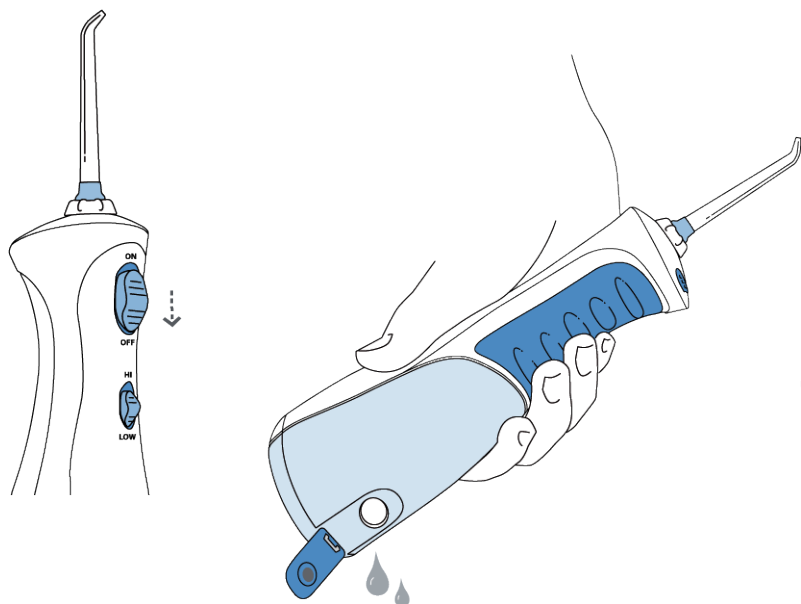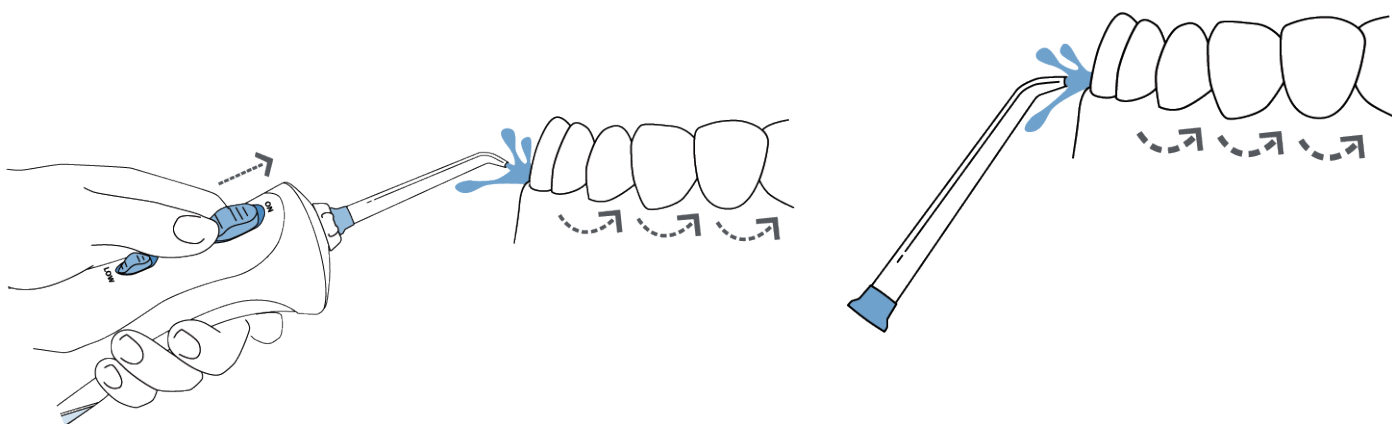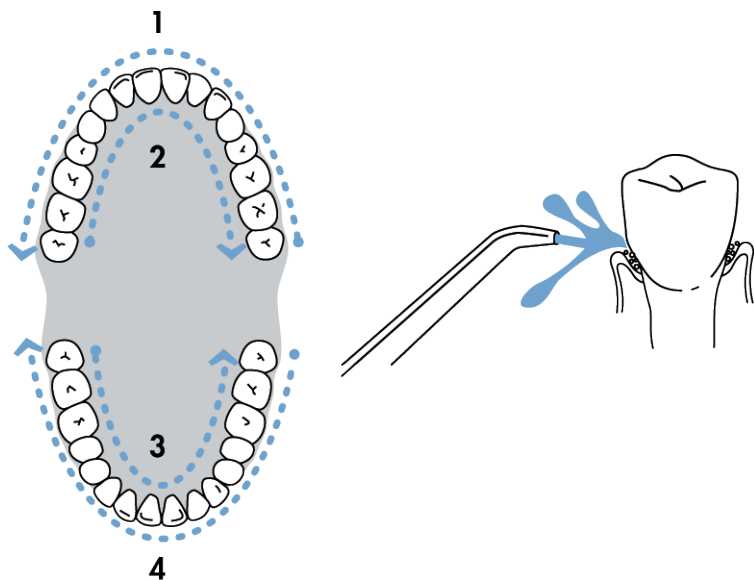

Anbefalt teknikk

Steng av apparatet og tøm beholderen.

Beholderen kan ved behov tas bort fra handtaget gjennom å skyve beholderens spærreknapp til siden samtidig som beholderen dras nedover.

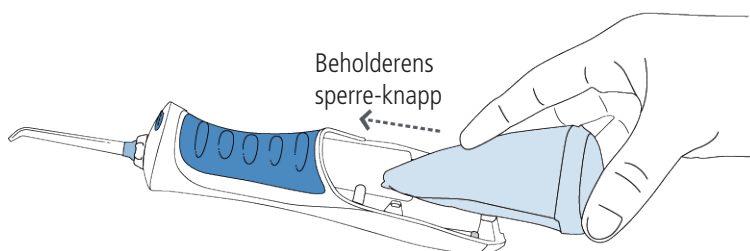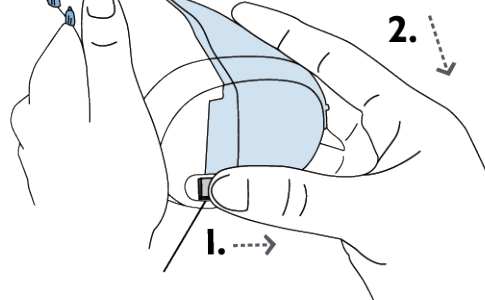

For å kunne sette tilbake beholderen på handtaget, skyv forsiktig beholderen oppover mot toppen på handtaget. Når beholderen sitter ordentlig på plass, hører man et klikk-lyd.

SPECIAL TIPS


Pik Pocket Tip

Pik Pocket Tippen som har en myk og spiss gummitip, som gjør så at vannet eller annen anbefalt bakteriedrepende væske tenger dypt ned i tannkjøttshulen.

Når man anvender Pik Pocket tippen bør man bøye seg ned mot handfatet og plassere den myke tippen på 45 graders vinkel ned mot tannkjøttskanten. Før deretter den myke spissen i tannhulsmellomromen. Start apparatet på den laveste trykkstyrken og led deretter tippen rundt alle kanter og mellomrom. Fortsett så systematisk til beholderen er tom.



Tungerengjørende Tip

Bøy deg framover over handfatet. Plasser tungerengjørende tippen på tungen. Sett apparatet på laveste trykk styrke. Trykkstyrken kan økes etter behov. Plasser tungerengjørende tippen på tungen som vist på bildet/tegningen.

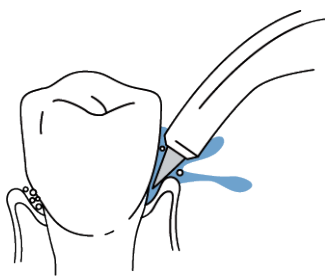

Orthodontic Tip

Den spesielle Orthodontic Tip er unikt designet så at man kan samtidig børste og skylle vannskligkommende områder, som feks. tannområder. Når du anvender Orthodontic Tippen, så bøy deg over handfatet og bruk tannbørsten for å børste rundt. Vannet kommer å rinne ut gjennom børsten og skylle bort bakteriebelegg og matrester som børstes bort av tannbørsten. Ret Tippen i en 90 graders vinkel mot tennene ved tannkjøttskanten.

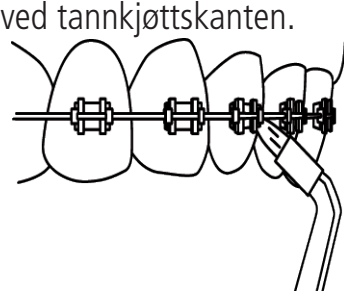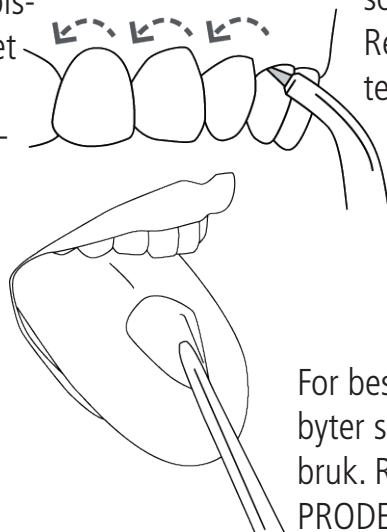

For best resultat anbefales det at mann byter sin Orthodontic Tip etter 6 måneders bruk. Reserve-tips kan kjøpes direkte av PRODENT EKULF AB, tlf. 69 15 30 00 eller besøk oss på www.ekulf.com for bestilling.

SERVICE/ UNDERHOLD

Anvendning av munnvann og andre dentalløsninger

Waterpik Ultra Portabel/oppladningsbar Mundusj kan brukes sammen med munnvann eller andre desinfiserende dentalløsninger. Rådfør deg med Din tannlege om hvilken type som passer deg eller om det i overhode er nødvendig.

OBSERVERE: Noen dentalløsninger kan forkorte levetiden for apparatet. Om du har noen spørsmål angående bruk av en viss dentalløsning, kontakt da Water Pik Inc. kundeservice.

HUSK å skylle av apparatet med rent lunket vann etter bruk av eventuelle dentalløsninger. Hold tippen ned mot handfatet og la apparatet kjøre/gå til den er helt tom. Dette forhindrer at tippen tømmes igjen og forlenger apparatets levetid.

Apparatet kan også tørkes av med en myk tørkefilt om nødvendig. Beholderen kan gjøres rent med vaskemiddel og vann eller i vaskemaskinen. Men ta bort den elektriske delen før du legger den i vaskemaskinen.

Om apparatet blir utsatt for kaldere temperatur, ta da bort beholderen og kjør apparatet til den er fullstendig tom. Dette er for at forhindre at vannet i apparatet fryser.

Service/Underhold

Waterpik Dental Water Jets inneholder ingen elektrisk del som krever/behøver løpende service/underhold. Reparasjon av apparatet bør bare utføres av en utorisert fakman eller Water Pik Inc. Det går også bra å ta kontakt med distributøren PRODENT EKULF AB, tlf. 69 15 30 00, info@ekulf.se, info@prodent.no for produkt- og serviceinformasjon. Ved all korrespondens opplysning om serviceinformasjon. Disse nummrene finnes under produkten/apparatet.

FEILSØKNINGSHJELP

PROBLEM	ÅRSAK	PROBLEMLØSNING
Jet Tips Lekasje mellom tip og roteringsringen.	1) Tippen er ikke helt nedtrykket.	1) Ta bort tippen og sett dit en ny så at et klikk-lyd høres.
Dental Water Jet handtag Beholderen lekker.	1) Væsken er igjen i beholderen. 2) Beholderen er ikke ordentlig satt fast med handtaget. 3) Påfyllingslokket til beholderen er åpen.	1) Tøm alltid beholderen etter bruk. 2) Ta bort beholderen og sett dit den, enlig instruksjonene. 3) Steng påfyllingslokket ordentlig.
Utilrekkelig trykk på vannstrålen.	1) Enheten er opp og ned. 2) Utilrekkelig mengde væske i beholderen. 3) Beholderen har kalket (kalk-mineral stoff) i gjen. 4) Justeringsrattet er satt på et lavt trykk (I).	1) Jet Tipen må være høyre oppe i forhold til beholderen. 2) Fyll på beholderen med væske. 3) Fyll beholderen med lunket vann og litt eddik. Kjør den tom. Fyll deretter beholderen full med vann. Kjør den tom. 4) Juster rattet til et høyere trykk (II).
Apparatet starter ikke.	1) Batteriet er ikke ladet.	1) Kontroller at stikkontakten fungerer ved å teste et annet apparat. Sett på/av-knappen til av (0). Få i gang laderen. Skal lade i 16 timer. 2) Kontroller så at alle kontakter er rene og hele.

Har du fortsatt spørsmål? Gå inn på www.waterpik.com.

Det går også bra å gå inn på www.ekulf.com eller ringe på tlf. 69 15 30 00.

BEGRENSET 2 ÅRS GARANTI

Water Pik Inc. garanterer kjøperen/eieren av dette nye produktet at den ikke har noen materialfeil og fungerer korrekt i 2 år fra og med kjøpsdatoet. Behold kvitteringen som bevis på inkøpsdato. Vi kommer til å reparere eller bytte ut deler som enligt våre oppfatninger er ødelagte/defekte. Dette gjelder ikke om endringene har blitt utført på produktet, om den har blitt feil brukt og /eller ikke har blitt brukt som i overkommelses bestemmelsene som er med i bruksanvisningen. Denne begrensede garantien gjelder ikke de forskjellige tilbehørene som Jet Tips osv.

Distributør:

Sverige



EKULF AB

Navestadsgatan 31

Box 111 01

600 11 NORRKÖPING

Tlf.: 0046 11 14 40 30

Fax: 0046 11 14 50 52

www.ekulf.com

Mail: info@ekulf.se

Norge



EKULF PRODENT

Telefon 69 15 30 00

Telefax 69 15 29 99

www.ekulf.com

E-post: info@prodent.no

waterpik®
treat yourself better™